


Pika-asennusopas kotikäyttöpaikkaan



- Valitse SDM "Home Profile" -kotiprofiili V-STATS™-ohjelmistossa
- Yhdistä erotusmuuntaja ja verkkojohdon pistokkeet
- Yhdistä erotusmuuntaja ja SDM
- Kytke verkkojohto pistorasiaan

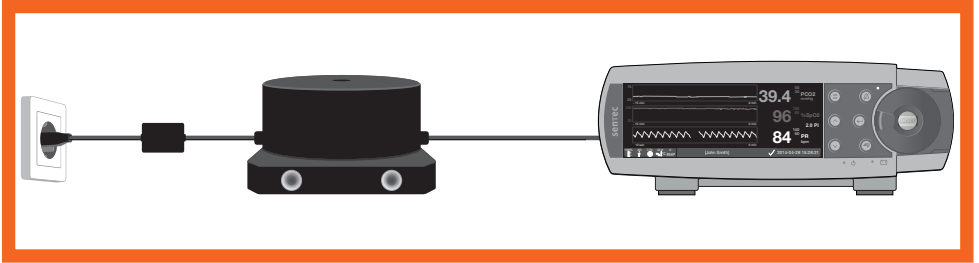

Katso lisätietoa oppaasta "SDMS – Asennus kotikäyttöpaikassa perhehtetyn henkilöstön toimesta" (HB-011471).



www.sentec.com/ifu



Sentec AG
Ringstrasse 39
CH-4106 Therwil
Sveitsi
www.sentec.com

HB-011464-
Julkaisupäivämäärä: 03/2021



CE
0123

Care with
Confidence